



FICHE METHODE

Préparation d'une solution par dilution d'un liquide pur ou d'une solution

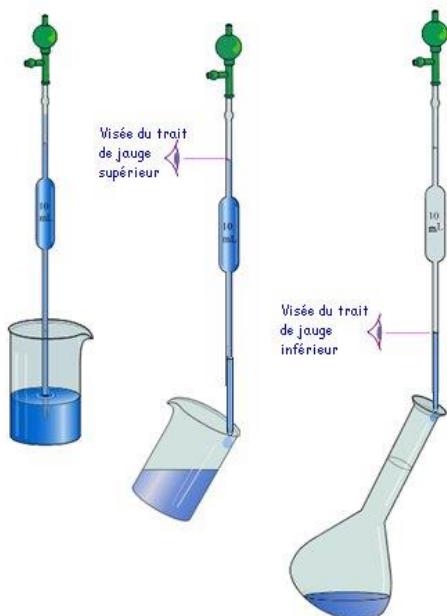

1. Rincer le bécher puis la pipette avec un peu de liquide ou de solution.
2. Remplir le bécher avec la quantité nécessaire au prélèvement.
3. Prélever à l'aide de la pipette la quantité de liquide en inclinant le bécher.
4. L'introduire dans la fiole jaugée qui est inclinée durant la manipulation.
5. Laver la pipette avec de l'eau et la ranger.

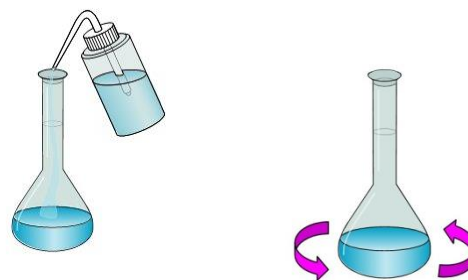

6. Ajouter alors de l'eau distillée jusqu'au tiers de la fiole.
7. Homogénéiser la solution.
8. Ajuster au trait de jauge à l'aide de la pissette.
9. Boucher la fiole jaugée avec un bouchon et homogénéiser la solution en retournant plusieurs fois la fiole.

