

Fiche guide pour l'utilisation du spectrophotomètre OVIO



1. Effectuer le branchement SpectroVio avec la cuve à l'ordinateur
2. Vérifier que la cuve soit vide et que la lampe soit allumée.
3. Sur le Bureau de l'ordinateur cliquer sur le dossier « Raccourcis Non utilisés » et rechercher « **VisualSpectra 2.1 Jr** »



4. Etalonnage de l'appareil :

- Appuyez sur « **START** »
- Faire le Noir

Mettre la plaque noire, refermer le couvercle et appuyer sur noir.

- Faire le blanc

Retirer la plaque noire puis mettre une cuve avec de l'eau distillée ou votre solvant. Refermer le couvercle, attendre que la courbe se stabilise puis appuyer sur Blanc.

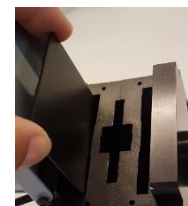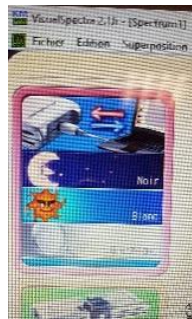


Lors de l'utilisation des cuves attention à ne toucher que la partie haute et striée pour éviter toutes traces et fausser vos résultats.

5. Effectuer vos mesures :

Possibilité 1 :


Dans le menu de gauche, cliquer sur « Absorbance », déplacer le curseur (disponible en bas à droite de l'écran) sur le maximum d'absorbance et lire la valeur de l'absorbance.

Pour mieux lire la valeur, utiliser la fonction « Zoom » disponible en bas à droite.

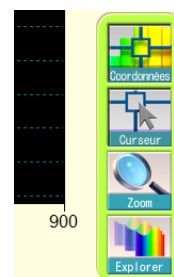


Possibilité 2 :

- Appuyer sur l'icône rouge en haut à droite sur le graphique (Quant Analysis)

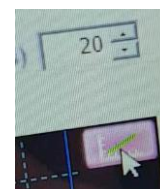


- Entrer la valeur de la longueur d'onde.

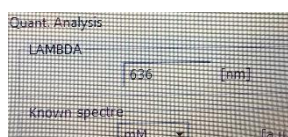

- Puis rentrer les 5 valeurs de vos concentrations en **mmol/L** et non en $\mu\text{mol/L}$

Puis effectuer les mesures de chaque solution en faisant bien attention à la manière dont vous manipulez votre cuve, en vérifiant que la cuve soit bien enfoncée et que le couvercle soit bien fermé. Pour chaque mesure, cliquer sur l'onglet >> pour obtenir la valeur de l'absorbance à la longueur d'onde souhaitée.

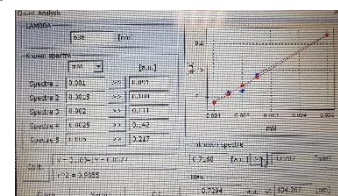

- Une fois vos 5 mesures faites, cliquez sur Calibrer. Refaites les mesures si vous avez des points trop éloignés
- Mesurer l'absorbance de la solution inconnue.
- Cliquer dans l'onglet « unknown spectre » sur >> et l'ordinateur affiche la valeur de l'absorbance à la longueur d'onde choisie ainsi que la concentration de la solution inconnue.